

# ▪ Gastroscopio EG-3890TK



Endoscopios



Gastrostomía



Terapéutico



Extra-grande



Doble Canal

- El tubo de inserción de 12.8 mm del endoscopio EG-3890TK tiene dos canales de trabajo, uno de 3.8 mm y otro de 2.8 mm; para proporcionar versatilidad y una capacidad de succión máxima. Este diseño único ofrece una elección de succión ya sea a través de un canal o a través de ambos de manera simultánea. El sistema de jet de agua, hace que sea posible dirigir un chorro de agua presurizado a cualquier área que esté cubierta con mucosa o sangre.

Los endoscopios de la Serie 90K PENTAX Medical proporcionan excelentes imágenes de alta resolución en una línea completa de aplicaciones médicas, con diseño ergonómico y la calidad establecida.

Excepcionales imágenes de alta resolución.


- El endoscopio Serie 90K incorpora sensores de imagen de alta resolución con iluminación brillante para proporcionar una claridad de imagen eficaz y detalles claros.

Diseño ergonómico probado.

- El endoscopio Serie 90K tiene un diseño ergonómico y fácil de usar con el manejo que se ha demostrado eficaz, procedimiento después del procedimiento.

Alta calidad establecida.

- Los 90K endoscopios ofrecen durabilidad y alta tecnología de Pentax Medical para el diagnóstico médico. Además ofrece un servicio post-venta para resolver problemas de manera eficaz y económica.

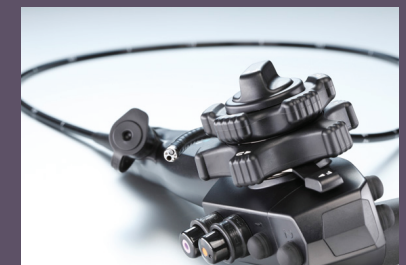

## ESPECIFICACIONES. Videogastroscopio EG-3890TK

Diámetro del tubo de inserción (ø mm)	Diámetro del canal de trabajo (ø mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Longitud Total (mm)	Campo de Visión (°)	Profundidad del campo de visión (mm)	Angulación Arriba/Abajo (°)	Angulación Izq./Der. (°)
12.8	3.8, 2.8	1050	1383	140	4-100	180/120	120/120